

SCHEDA TECNICA

Rev. 1.0 - 26 maggio 2025

BILANCIA PESAPERSONA DIGITALE A COLONNA



IDENTIFICAZIONE

Codice dispositivo	704
Fabbricante	seca GmbH & Co. KG
Società autorizzata alla distribuzione in Italia	Captotek S.r.l. Via Cassanese, 224 Palazzo Giotto – 22054 Segrate (MI)
Dispositivo medico	Si
Codice CND	V0399
ID registrazione BD/RDM	93791/R
Dichiarazione di conformità del fabbricante	Si
Conformità alla direttiva 93/42/CEE	Si
Classe del dispositivo medico	Im
Classe di approvazione	III
Classe e tipo CEI 62-5	IIB




IMMAGINI

Pedana



Dettagli

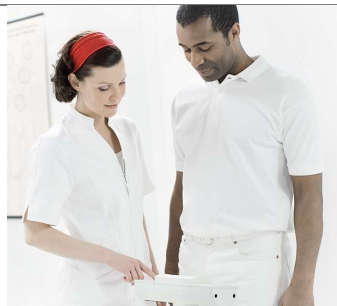

DATI GENERALI

Standard applicati	EN 45501 - EN 60601-1
Compatibilità elettromagnetica	IEC 60601-1-2
Sterile	No
Monouso	No
Latex Free	Si
Anno immissione in commercio	2014
Garanzia	12 mesi per difetti di fabbrica ad esclusione delle parti soggette a usura

DESTINAZIONE D'USO

La bilancia pesa persona seca 704 è indicata per la determinazione del peso anche in pazienti obesi. E' impiegata principalmente negli ospedali e ambulatori. La funzione BMI consente di valutare lo stato nutrizionale generale del paziente.

CARATTERISTICHE DESCRITTIVE

Bilancia elettronica a colonna con portata fino a 300 kg ed una divisione di 50 g. L'ampia pedana antiscivolo è dotata di ruote per il trasporto. Il funzionamento a batteria o con alimentazione a rete (optional seca 447), permettono di utilizzarla dove necessario.

Il minimo consumo di energia assicura un alto numero di pesate con un set di batterie.

E' possibile integrare un altimetro meccanico (optional seca 220).

E' dotata della funzione BMI (Body-Mass-Index) per ottenere informazioni sulle condizioni nutrizionali dei pazienti.



CARATTERISTICHE TECNICHE

BILANCIA PESAPERSONA DIGITALE A COLONNA

Portata	300 kg
Divisione	50 g < 150 kg > 100 g
Dimensioni (L x A x P)	360 x 930 x 520 mm
Dimensioni piattaforma di pesata	335 x 80 x 345 mm
Peso	14.9 kg
Alimentazione elettrica	A batterie/alimentatore a rete elettrica optional
Funzioni	<ul style="list-style-type: none">- TARA- Pre-TARA- Funzione mamma/bambino- HOLD- Auto-HOLD- BMI- Auto-CLEAR- Selezione automatica range di pesata- Ammortizzatore- Attivazione segnale acustico- RESET- Spegnimento automatico- Ruote di trasporto
Condizioni ambientali di utilizzo - Temperatura - Pressione atmosferica - Umidità dell'aria	Da +10 °C a +40 °C (da 50 °F a 140 °F) 700 hPa - 1060 hPa 30 % - 80 % senza formazione di condensa
Condizioni ambientali di stoccaggio - Temperatura - Pressione atmosferica - Umidità dell'aria	Da -10 °C a +60 °C (da 14 °F a 140 °F) 700 hPa - 1060 hPa 0 % - 95 % senza formazione di condensa
Condizioni ambientali di trasporto - Temperatura - Pressione atmosferica - Umidità dell'aria	Da -10 °C a +60 °C (da 14 °F a 140 °F) 700 hPa - 1060 hPa 0 % - 95 % senza formazione di condensa



INFORMAZIONI UTILI*

Controindicazioni e avvertenze	L'utilizzo di detersivi e disinfettanti non adatti può provocare danni alle superfici delicate dell'apparecchio.
Conservazione	Conservare il dispositivo in luogo fresco e asciutto. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
Manutenzione e pulizia	Far eseguire i lavori di manutenzione e di riparazione solo da personale specializzato.
Modalità di smaltimento	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

*Per ulteriori dettagli preghiamo attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

COMPONENTE	DESCRIZIONE	Pz / confezione
704	Bilancia digitale a colonna	1
	Manuale di istruzioni in lingua italiana	1

ACCESSORI OPZIONALI

COMPONENTE	DESCRIZIONE	Pz / confezione
220	Altimetro per bilance a colonna	1
447	Alimentatore a rete elettrica	
	Manuale di istruzioni in lingua italiana	1

CRONOLOGIA DELLE REVISIONI

REVISIONE	DESCRIZIONE	Data
1.0	Prima emissione della scheda tecnica da parte di Captotek S.r.l.	14.04.2025

AVVERTENZE

Questo documento è stato redatto da Captotek S.r.l in conformità alle specifiche tecniche del prodotto ed è sotto revisione.

È espressamente vietato apportare modifiche anche parziali al documento senza autorizzazione.